



# ZIPPIE VOYAGE

SPACEREM PRZEZ  
ŻYCIE





# ZIPPIE voyage

## NOWOCZESNY. PROSTY W UŻYCIU NAJLEPSZY DLA DZIECKA.

Uniwersalny Zippie Voyage jest wyrobem medycznym łączącym funkcjonalność wózka spacerowego Baby Jogger z wyjątkowo uniwersalnym siedziskiem dla rosnących dzieci oraz jedną z najbogatszych ofert użytecznych akcesoriów na rynku. Wszystko to sprawia, że jest to intuicyjny, prosty w obsłudze wózek spacerowy, zapewniający dziecku to, co najlepsze.

**// TELESKOPOWY UCHWYT DO WÓZKA**  
Lekkie i proste dostosowywanie jedną ręką do wzrostu opiekuna.

**// HAMULEC**  
Kiedy starasz się jednocześnie zapanować nad dziećmi, torbami i sprzętem medycznym, do zablokowania kół wystarczy jedno pociągnięcie dźwigni hamulca.

**// OPATENTOWANA TECHNOLOGIA SZYBKIEGO SKŁADANIA**  
Jednym pociągnięciem składa się do bardzo kompaktowej formy, aby można było szybko wyruszyć w drogę.

**// DASZEK Z OKIENKIEM Z SIATKI**  
Dziecko jest chronione przed słońcem, a okienko pozwala spojrzeć, czy wszystko w porządku.


**// POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA POTRZEBNYCH RZECZY**  
Wygodny kosz mieści do 7 kg niezbędnych rzeczy.

**// OBROTOWE PRZEDNIE KOŁA Z ZAWIESZENIEM I BLOKADĄ POZYCJI**  
Płynnie pokonuj nierówności i omijaj przeszkody, zapewniając dziecku spokój, bezpieczeństwo i komfort. Możliwość zablokowania przednich kół przydaje się podczas dłuższych spacerów..





# SIEDZENIE DLA ROSNĄCYCH DZIECI!

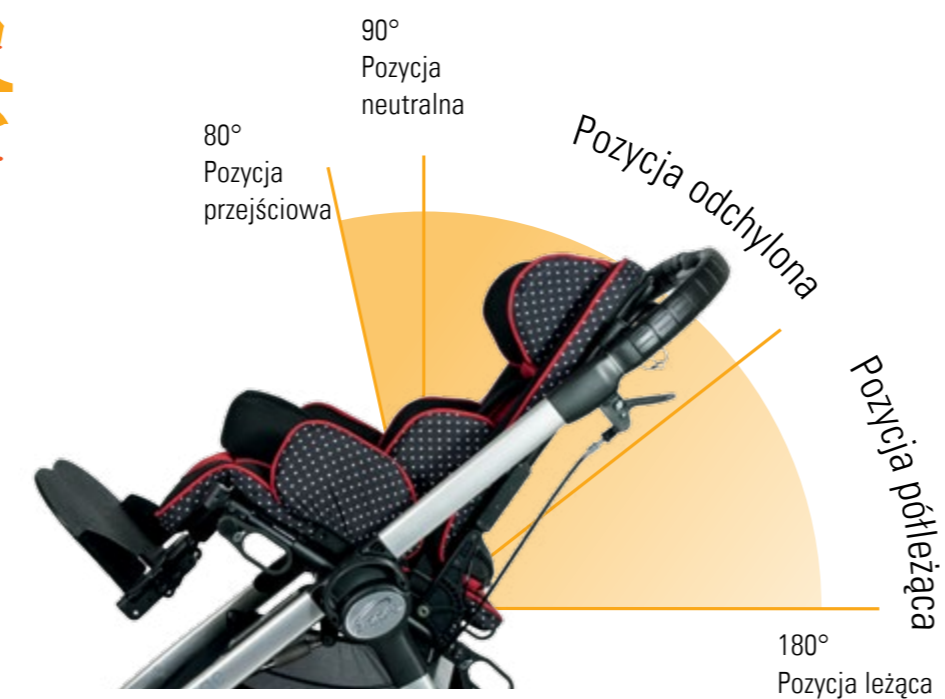

**// PROSTA REGULACJA ODCHYLENIA**  
 Pozycja odchylona i półleżąca ułatwiają karmienie, trawienie, oddychanie oraz orientację wzrokową. Aby ustawić pozycję odchyloną (zakres 35o) oraz leżącą (do 180o) w wózku Zippie Voyage, wystarczy użyć hamulca, znajdującego się za oparciem.

Dla Zippi Voyage najważniejsza jest dbałość o prawidłowy wzrost dziecka, by maluch zdrowo się rozwijał.



**// PODNÓŻEK**  
 Regulacja wysokości i kąta nachylenia, opcjonalnie paski na stopy i uchwyty na buty





**// OPATENTOWANA TECHNOLOGIA SZYBKIEGO SKŁADANIA**

Jednym pociągnięciem składa się do bardzo kompaktowej formy, aby można było szybko wyruszyć w drogę. Złożony stelaż zachowuje równowagę i daje się łatwo przytrzymać, umożliwiając zachowanie naturalnego położenia ramion.



Zatwierdzono do użycia jako fotel dla pasażera w pojeździe mechanicznym, pod warunkiem zastosowania atestowanego mocowania do wózka. inwalidzkiego oraz systemu zabezpieczenia pasażera.

## PROSTY I WYGODNY W CODZIENNEJ OBSŁUDZE

Szybko i wygodnie jednym ruchem zamontujesz i zdemontujesz siedzisko wózka spacerowego. Dzięki temu jego transport jest prosty, a wózek mieści się nawet do niewielkiego auta.



**// ŁATWA ZMIANA USTAWIENIA SIEDZISKA**

Ustaw siedzisko przodem do siebie, aby mieć kontakt z dzieckiem lub przodem do kierunku jazdy, by dziecko mogło oglądać otoczenie.

**// ADAPTER SIEDZISKA Z ZATRZASKIEM**

Dzięki adapterowi montaż i demontaż siedziska jest bardzo prosty. Prowadnice pomagają ustawić siedzisko w odpowiednim położeniu, a słyszalne kliknięcie wskazuje, że siedzenie zostało bezpiecznie zamocowane.





# ŻYCIE JEST KOLOROWE!

Wózek Zippie Voyage to nowoczesny design. Do estetycznej tapicerki w groszki możemy dobrać jeden z czterech wyrazistych kolorów, by podkreślić jego indywidualny charakter.



## // STELAŻ GÓRA - DÓŁ JCM

Ten opcjonalny stelaż z regulacją położenia góra-dół pozwala dziecku uczestniczyć w zajęciach przy stole lub na podłodze, a jednocześnie pozostać w wygodnej i prawidłowej pozycji siedzącej.







## FUNKCJONALNE AKCESORIA ZIPPIE VOYAGE

Wózek Zippie Voyage jest dostępny w różnych opcjach i z różnymi akcesoriami, ułatwiającymi codzienne zajęcia, by rodzice i opiekunowie mogli się cieszyć każdą chwilą spędzaną z bliskimi.



### // DOSTAWKA DLA DRUGIEGO DZIECKA

Dostawka pozwala starszemu dziecku dołączyć do podróży. Można ją łatwo przymocować do tylnej osi wózka, a jej antypoślizgowa powierzchnia zapewnia małemu użytkownikowi bezpieczeństwo.



### // UCHWYT NA KUBEK

Uchwyt na butelkę wody czy kubek z kawą. Dzięki mechanizmowi samopoziomującemu nic się nie rozleje podczas spaceru.



### // DRAŻEK NA WYSOKOŚCI BRZUCHA

Drażek znajdujący się na wysokości brzucha dziecka to bezpieczny i wygodny uchwyt, idealny na spacer.



### // STOLIK

Stolik dostępny jest w dwóch wersjach: z jasnoszarego lub przezroczystego szkła akrylowego. Obie wersje mają regulację wysokości i głębokości.



### // HACZYK

Praktyczny haczyk na torby. Łatwy w montażu pasek zapinany na rzep, który nie przesuwają się.



### // STOLIK NA RESPIRATOR

Wszechstronny stolik na respirator montowany centralnie pod ramą. Maksymalny udźwig 23 kg.



### // PRAKTYCZNA PLATFORMA

Montowana z przodu platforma ułatwia dostęp do przewożonych przedmiotów.



### // UCHWYT NA BUTY

Uchwyt na buty unieruchamia stopy, pomagając dziecku w utrzymaniu właściwej pozycji.



# DANE TECHNICZNE

## Zippie Voyage // Wczesna interwencja

<b>Maksymalna waga Użytkownika:</b>	34 kg	<b>Maks. szerokość cofania:</b>	110 cm
<b>Szerokość siedziska:</b>	24 – 30 cm, z wkładkami wew. 15,5 cm (bez tapicerki)	<b>Maks. bezpieczne nachylenie</b>	9° (podczas korzystania z hamulca postojowego)
<b>Głębokość siedziska:</b>	20 – 34 cm (bez tapicerki)	<b>Koła tylne:</b>	12,5" pneumatyczne
<b>Długość podudzia (LLL):</b>	15,5 – 31 cm	<b>Kółka przednie:</b>	7"
<b>Wysokość oparcia:</b>	41 – 61 cm (bez tapicerki)	<b>Waga siedziska:</b>	6 kg
<b>Kąt pochylenia oparcia:</b>	100° (80° do 180°)	<b>Waga podstawy:</b>	12 kg
<b>Kąt pochylenia siedziska:</b>	35° (-5° do 30°)	<b>Części demontowalne:</b>	Siedzisko i koła - tylko do transportu
<b>Wysokość siedziska:</b>	59 – 66 cm (3 możliwe wysokości: 59 / 62 / 66 cm)	<b>Opcje kolorystyczne:</b>	4 kolory - niebieski, czerwony, beżowy i szary
<b>Całkowita szerokość:</b>	63 cm	<b>Rama:</b>	Aluminium
<b>Całkowita długość:</b>	110 cm	<b>Crash test:</b>	Tak; testowany zgodnie z ISO 7176-19 (2008)
<b>Całkowita wysokość:</b>	98 – 105 cm	<b>Transport bez Użytkownika:</b>	Dozwolony do transportu (w samochodzie czy samolocie)
<b>Długość po złożeniu:</b>	80 cm	<b>Przeznaczenie i środowisko:</b>	Dla dzieci z ograniczoną mobilnością; do użytku wewnątrz i na zewnątrz; produkt opiekuńczy
<b>Wysokość po złożeniu:</b>	37 cm		

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia na naszej stronie internetowej.  
Broszura jest również dostępna w wersji PDF na [www. Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)



### Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6  
94-103 Łódź  
Tel.: +48 42 275 83 38  
Fax: +48 42 209 35 23  
E-Mail: [pl@sunrisemedical.de](mailto:pl@sunrisemedical.de)  
[www.Sunrise-Medical.pl](http://www.Sunrise-Medical.pl)